

shower chair
with back

silla con respaldo
para la ducha

siège de douche
avec dossier

Item # RTL12202KDR



EU Authorized Representative
Y Sung Handelsvertretung
Duesselthaler Str. 24 40211
Duesseldorf, Germany

www.drivemedical.com

www.drivemedical.com

driveTM

driveTM

assembly instructions

Weight Capacity: 300 lbs (136 Kg)

1. Remove contents from carton.
2. Place the leg section marked with a “B” into the groove of the bottom of the seat marked “B”. Place the leg section marked with an “A” on top of the “B” tube and into the groove of the seat marked “A”. Insert the shorter thumb screw through the middle hole but do not fully tighten the screw.



3. Assemble backrest by taking the “L” shaped backrest supports and securing them to the back rest using the shorter thumb screws as shown below.



4. Attach backrest to the seat by aligning holes on “L” shaped frame supports with the holes on the leg section. Secure the legs of the frame marked “B” in place by using the longer thumbs screws by making sure to pay attention to the “rear” of the seat marked on the bottom.



Note: Seat depth can be adjusted by choosing 1 of the 2 holes on the frame supports.


5. Secure the legs of the frame marked “A” in place with the remaining 2 longer thumb screws.



6. Fully tighten the middle shorter middle screw and 2 screws in the B frame and check to make sure all screws are fully tightened.
7. Insert legs into leg frame by depressing push pins, sliding legs over the receptacle and setting to desired height. Make sure all the legs are set to the same height.



1. Before use, adjust height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height. When desired height is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes, per illustration.
2. To be sure legs are locked into place by pushing down on or by pulling legs.

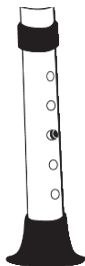

additional precautions

1. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
2. Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
3. Regularly check thumb screws to make sure they are fully tightened.
4. Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
5. All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
6. When used in a tub, make certain the rubber tips are not touching the sides of the tub wall.
7. DO NOT stand on chair.

NOTE: To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

maintenance

Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, loose, or rusted and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more info.

lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2020 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

instrucciones de armado

Capacidad: 300 lbs (136 Kg) de peso

1. Retire el contenido de la caja de cartón.
2. Coloque la sección de la pierna marcada con una “B” en la ranura de la parte inferior del asiento con la marca “B”. Coloque la sección de la pierna marcada con una “A” en la parte superior del tubo “B” y en la ranura del asiento marcado con “A”. Inserte el tornillo de mariposa más corto a través del orificio central, pero no apriete completamente el tornillo.



3. Monte el respaldo tomando los soportes del respaldo con forma de “L” y asegurándolos al respaldo con los tornillos de mariposa más cortos, como se muestra a continuación.



4. Sujete el respaldo al asiento alineando los orificios en los soportes con forma de “L” con los orificios en la sección de la pierna. Asegure las patas del marco marcado “B” en su lugar utilizando los tornillos de pulgar más largos asegurándose de prestar atención a la “parte trasera” del asiento marcado en la parte inferior.



Nota: La profundidad del asiento se puede ajustar eligiendo 1 de los 2 orificios en los soportes del marco.


5. Asegure las patas del marco marcado “A” en su lugar con los 2 tornillos para pulgar más largos restantes.



6. Apriete completamente el tornillo central medio más corto y los 2 tornillos en el marco B y verifique que todos los tornillos estén bien apretados.
7. Inserte las patas en el marco de la pierna presionando los pasadores de empuje, deslizando las patas sobre el receptáculo y ajustando a la altura deseada. Asegúrese de que todas las patas estén ajustadas a la misma altura.



1. Ajuste la altura de cada pata dependiendo de sus necesidades específicas antes de su uso, asegúrese que todas las patas tengan la misma altura. Cuando logre la altura deseada, asegure las patas en su lugar al alinear los botones con sus orificios correspondientes, como se muestra en la ilustración.
2. Presione las patas hacia abajo o jálelas para asegurarse que las patas están bloqueadas en su lugar.

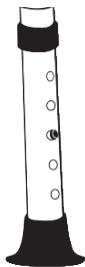

precauciones adicionales

1. Inspeccione todas las partes antes de ensamblarlas para asegurarse que no se hayan dañado durante el envío. **NO LO USE** si detecta daños por envío. Póngase en contacto con el distribuidor/portador para recibir instrucciones adicionales.
2. Asegúrese de que los botones de ajuste a presión para la altura salgan completamente por los hoyos respectivos para cada extensión de la pata. Esto asegurará que las extensiones de las patas estén bloqueadas de manera segura en su posición y que tengan una altura uniforme.
3. Controle regularmente los tornillos de mariposa para asegurarse de que estén bien apretados.
4. Verifique que los tapones de plástico de las extensiones de las patas no estén rotos, desgastados o ausentes. Reemplace inmediatamente cualquier tapón o reemplácelos todos si tienen imperfecciones.
5. Todos los cuatro tapones de las patas **DEBEN** de tocar el piso simultáneamente en todo momento.
6. Cuando se utiliza en una bañera, asegúrese de que las puntas de goma no se toquen los lados de la pared de la bañera.
7. **NO SE** pare sobre la silla.

NOTA: Para conservar la belleza del acabado original, limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.

mantenimiento

Drive recomienda una inspección visual periódica de este producto por parte del usuario, para garantizar que todas las piezas y herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y no estén desgastados, rotos, deshilachados, sueltos o oxidado y que no haya obstrucciones o impedimentos para la normalidad, operación segura. Si alguna parte o mecanismo parece ser inseguro o comprometido, no use el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite www.drivemedical.com/help para obtener más información.

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2020 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

instructions de montage

Capacité de poids de 300 lbs (136 Kg)

1. Retirer le contenu du carton.
2. Placez la section de jambe marquée d'un «B» dans la rainure du bas du siège marquée «B». Placez la section de jambe marquée d'un «A» sur le tube «B» et dans la rainure du siège marqué «A». Insérez la vis à oreilles la plus courte dans le trou central mais ne serrez pas complètement la vis.



3. Assemblez le dossier en prenant les supports de dossier en forme de «L» et en les fixant au dossier à l'aide des vis à oreilles plus courtes comme indiqué ci-dessous.



4. Fixez le dossier au siège en alignant les trous sur les supports de cadre en forme de «L» avec les trous de la section de jambe. Fixez les pattes du cadre portant la marque «B» en place en utilisant les vis des pouces les plus longues en veillant à faire attention à «l'arrière» du siège marqué en bas.



Remarque: La profondeur d'assise peut être ajustée en choisissant 1 des 2 trous sur les supports de châssis.


5. Fixez les pattes du cadre marqué «A» avec les 2 vis moletées les plus longues restantes.



6. Serrez à fond la vis du milieu plus courte du milieu et les 2 vis du cadre en B et vérifiez que toutes les vis sont bien serrées.
7. Insérez les jambes dans le cadre de la jambe en appuyant sur les punaises, en faisant glisser les jambes sur le réceptacle et en les réglant à la hauteur désirée. Assurez-vous que toutes les jambes sont réglées à la même hauteur.



1. Avant utilisation, régler chaque patte à la hauteur qui vous convient, en s'assurant que toutes les pattes sont à la même hauteur. Lorsque la hauteur voulue est atteinte, bloquez les pattes en place en alignant les boutons dans les bons trous, comme dans l'illustration.
2. Vérifiez que les pattes sont bloquées en poussant ou en tirant sur les pattes.

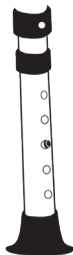

autres précautions

1. Inspectez toutes les pièces qui ont pu être endommagées à l'expédition avant le montage. **NE PAS UTILISER** le produit en cas de dommages lors de l'expédition. Entrez en contact avec le détaillant et le transporteur pour d'autres instructions.
2. Assurez-vous que les boutons-pression de réglage de la hauteur ressortent complètement des mêmes trous respectifs à chaque longueur de patte. Ceci fera en sorte que les longueurs de patte sont solidement fixées en position et que la hauteur est uniforme.
3. Vérifiez régulièrement les vis à oreilles pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
4. Vérifiez que les embouts en caoutchouc sur les longueurs de patte ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Remplacez immédiatement s'il y a le moindre défaut.
5. Toutes les quatre longueurs de pattes avec des embouts en caoutchouc **DOIVENT** toujours toucher le plancher simultanément.
6. Lorsqu'il est utilisé dans une baignoire, assurez-vous les embouts en caoutchouc ne touchent pas les côtés de la paroi de la cuve.
7. **NE PAS SE TENIR DEBOUT** sur le siège.

REMARQUE: Pour maintenir la beauté du fini d'origine, nettoyez avec un savon doux et rincez avec de l'eau tiède. Essuyez le siège du bain pour l'assécher après chaque utilisation.

entretien

Drive recommande une inspection visuelle périodique de ce produit par l'utilisateur afin de s'assurer que toutes les pièces et le matériel sont sécurisés, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés, desserrés ou rouillés et qu'il n'y a aucune obstruction, fonctionnement sûr. Si une pièce ou un mécanisme semble dangereux ou compromis, n'utilisez pas le produit. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez www.drivemedical.com/help pour plus d'informations.

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2020 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine