


Etac Swift Mobil-2


Manual

etac®


78691.13 23-01-18

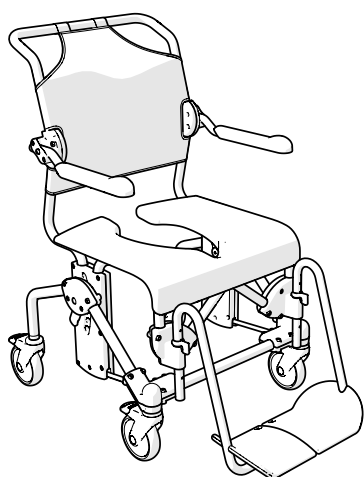

Swift Mobil-2

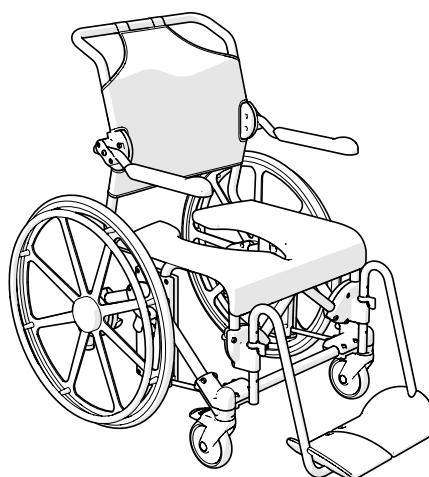

Swift Mobil 24"-2

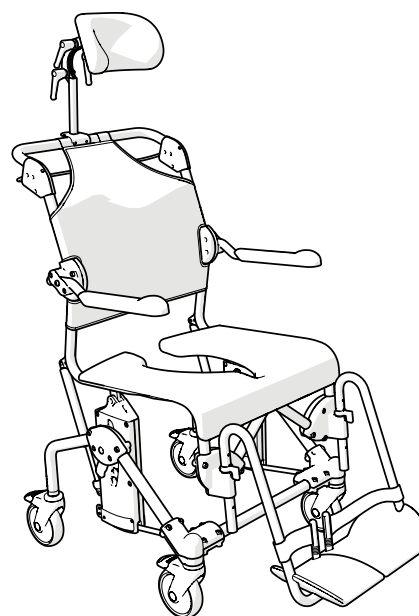

Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil-2 XL

Swift Mobil Tilt-2 XL

sv	Innehållsförteckning
Bilder.....	3-11
Allmänt	12
Produktbeskrivning.....	12
Montering	12
Tekniska data.....	12
Garanti / Underhåll	12
Säkerhet.....	12
Förflyttning	13
Justering.....	13
Benstöd	13
Tippfunktion.....	13
Tillbehör	14

no	Innholdsfortegnelse
Bilder	3-11
Generelt	15
Produktbeskrivelse	15
Montering	15
Tekniske data	15
Garanti/vedlikehold	15
Sikkerhet	15
Forflytning	16
Justering	16
Fotstøtter	16
Vippefunksjon	16
Tilbehør	17

da	Indholdsfortegnelse
Billeder	3-11
Generelt	18
Produktbeskrivelse	18
Montering	18
Tekniske data	18
Garanti / Vedligeholdelse	18
Sikkerhed	18
Forflytning	19
Justering	19
Benstøtter	19
Vippefunktion	19
Tilbehør	20

en	Contents
Images.....	3-11
General	21
Product description	21
Assembly	21
Technical data	21
Warranty / maintenance	21
Safety	21
Transfers	22
Adjustment	22
Legrest	22
Tilt function	22
Accessories	23

de	Inhalt
Abbildungen	3-11
Allgemeines	24
Produktbeschreibung	24
Montage	24
Technische Daten	24
Garantie / Wartung	24
Sicherheit	25
Umsetzen	25
Einstellung	25
Beinstützen	25
Kippfunktion	25
Zubehör	26

fi	Sisällysluettelo
Kuvat	3-11
Yleistä	27
Tuotekuvaus	27
Kokoaminen	27
Tekniset tiedot	27
Takuu / Huolto	27
Turvallisuus	27
Siirtäminen	28
Säätö	28
Jalkatuot	28
Kallistustoiminto	28
Lisävarusteet	29

fr	Sommaire
Images	3-11
Généralités	30
Présentation du produit	30
Montage	30
Caractéristiques techniques	30
Garantie / maintenance	30
Sécurité	30
Transferts	31
Réglage	31
Supports de pieds	31
Fonction de basculement	31
Accessoires	32

nl	Inhoudsopgave
Afbeeldingen	3-11
Algemeen	33
Productbeschrijving	33
Montage	33
Technische gegevens	33
Garantie / onderhoud	33
Veiligheid	33
Verplaatsen	34
Verstelling	34
Voetensteun	34
Kantelfunctie	34
Toebehoren	35


is	Innihald
Myndir	3-11
Almennt	36
Vörulýsing	36
Samsetning	36
Tæknileg gögn	36
Ábyrgð / viðhald	36
Öryggi	36
Flutningur	37
Stilling	37
Fótstöð	37
Hallavirkni	37
Fylgihlutir	38

it	Indice
Immagini	3-11
Informazioni generali	39
Descrizione del prodotto	39
Montaggio	39
Dati tecnici	39
Garanzia / manutenzione	39
Sicurezza	39
Trasferimenti	40
Regolazione	40
Poggiagambe	40
Funzione di inclinazione	40
Accessori	41


es	Índice
Imágenes	3-11
Recomendaciones generales	42
Descripción del producto	42
Montaje	42
Especificações técnicas	42
Garantía / mantenimiento	42
Seguridad	42
Traslados	43
Ajuste	43
Apoyo para las piernas	43
Función de inclinación	43
Accesorios	44

pt	Índice
Imagens	3-11
Generalidades	45
Descrição do produto	45
Montagem	45
Especificações técnicas	45
Garantia/manutenção	45
Segurança	45
Transferências	46
Ajuste	46
Apoio para as pernas	46
Função de inclinação	46
Acessórios	47

A

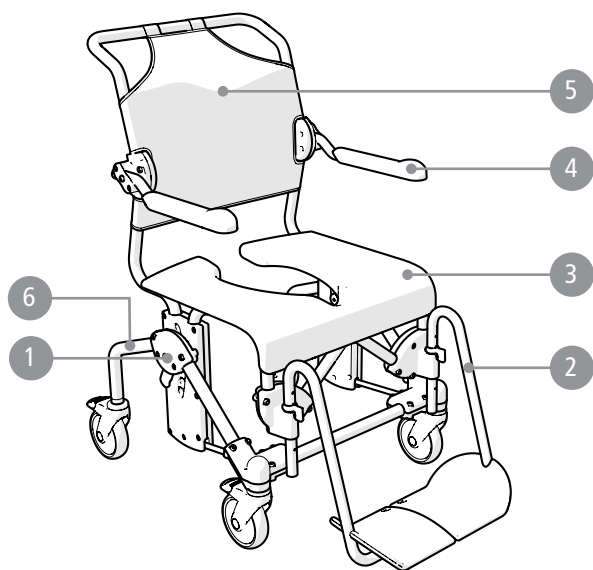


Swift Mobil-2

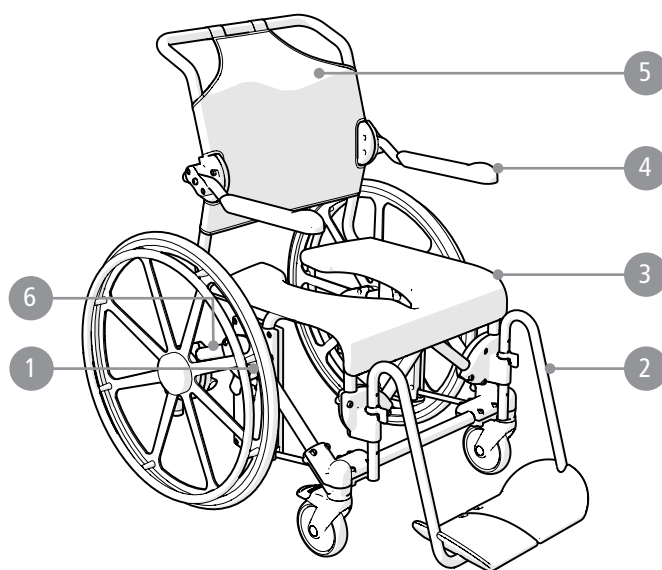








Swift Mobil 24"-2

Swift Mobil-2 XL

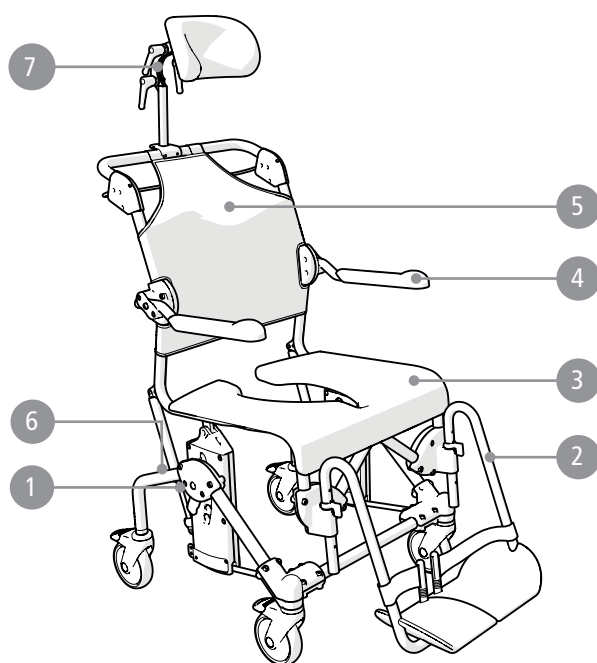

Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2 XL

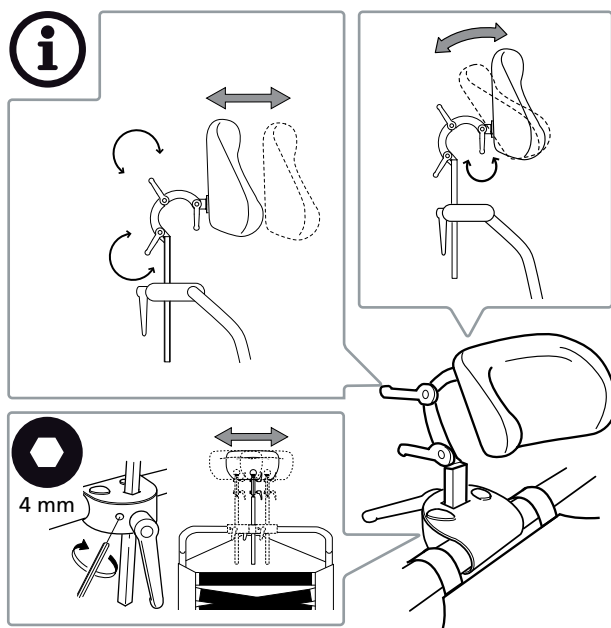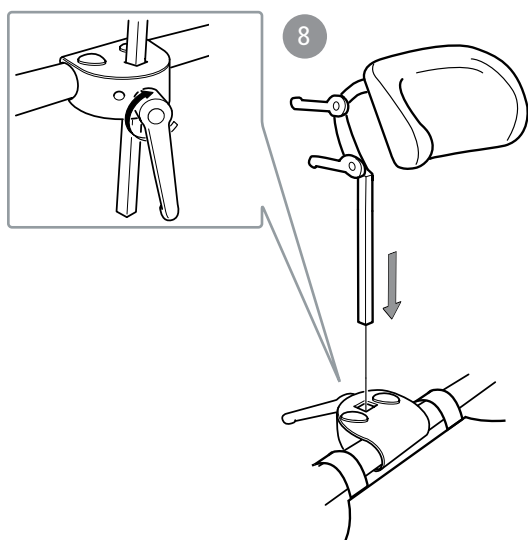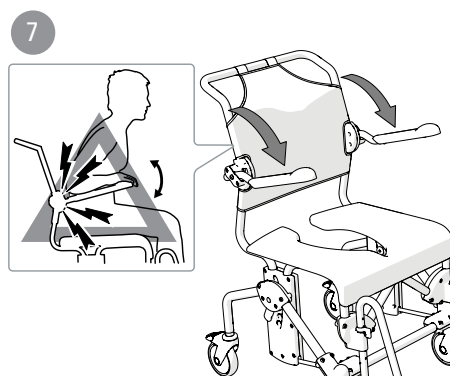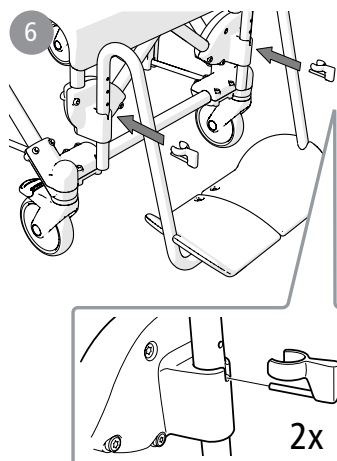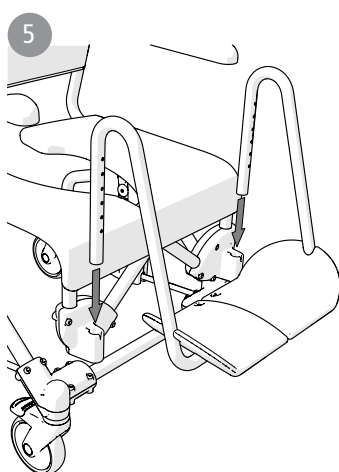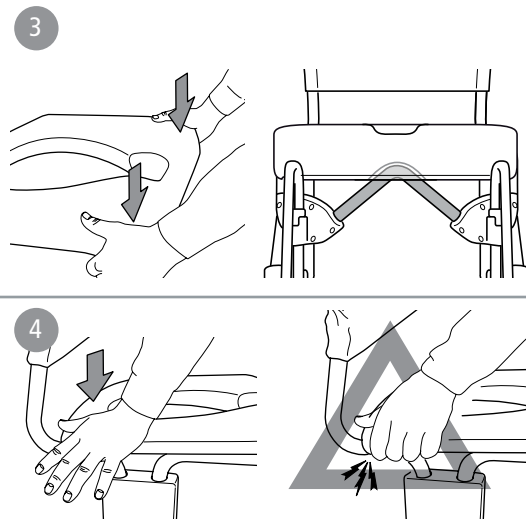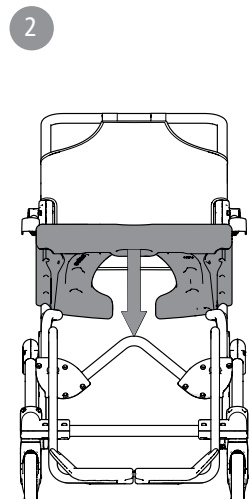

○		●	Swift Mobil-2
○		●	Swift Mobil-2 XL
○		●	Swift Mobil 24" - 2
●		●	Swift Mobil Tilt-2
●		●	Swift Mobil Tilt-2 XL

C

Swift Mobil-2	93 cm 36½"	57/58/64 cm 22½/22¾/25¼"	45 / 60 cm 17¾" / 23½"	50 cm 19¾"	46,5 cm 18¼"	34 / 46,5 cm 13½" / 18¼"	50 cm 19¾"
Swift Mobil-2 XL	93 cm 36½"	61/64/70 cm 24/25¼/27½"	45 / 60 cm 17¾" / 23½"	50 cm 19¾"	46,5 cm 18¼"	34 / 46,5 cm 13½" / 18¼"	50 cm 19¾"
Swift Mobil 24"-2	106 cm 41¾"	74 cm 29¼"	45 / 60 cm 17¾" / 23½"	50 c 19¾"	46,5 cm 18¼"	34 / 46,5 cm 13½" / 18¼"	50 cm 19¾"
Swift Mobil Tilt-2	102 cm 40¼"	57/58/64 cm 22½/22¾/25¼"	50 / 65 cm 19¾" / 25½"	55 cm 21¾"	46,5 cm 18¼"	34 / 46,5 cm 13½" / 18¼"	50 cm 19¾"
Swift Mobil Tilt-2 XL	102 cm 40¼"	61/64/70 cm 24/25¼/27½"	50 / 65 cm 19¾" / 25½"	55 cm 21¾"	46,5 cm 18¼"	34 / 46,5 cm 13½" / 18¼"	50 cm 19¾"

Swift Mobil-2	22/25/28 cm 8¾/9¾/11"	42/48/54 cm 16½/19/21¼"	54 cm (47 cm*) 21¼" (18½"*)	95-110 cm 37½"-43¼"	125 mm 5"	-	16,6 kg 37 lbs
Swift Mobil-2 XL	22/25/28 cm 8¾/9¾/11"	48/54/60 cm 19/ 21¼/23½"	54 cm 21¼"	95-110 cm 37½"-43¼"	125 mm 5"	-	17,3 kg 38 lbs
Swift Mobil 24"-2	22/25/28 cm 8¾/9¾/11"	42/48/54 cm 16½/19/21¼"	67 cm 26¼"	95-110 cm 37½"-43¼"	125 mm 5"	610 mm 24"	25,1 kg 55 lbs
Swift Mobil Tilt-2	22/25/28 cm 8¾/9¾/11"	42/48/54 cm 16½/19/21¼"	60 cm 23½"	100-115 cm 39¼"-45¼"	125 mm 5"	-	20,4 kg 45 lbs
Swift Mobil Tilt-2 XL	22/25/28 cm 8¾/9¾/11"	48/54/60 cm 19/ 21¼/23½"	60 cm 23½"	100-115 cm 39¼"-45¼"	125 mm 5"	-	21 kg 46 lbs

*Art no 8022 9489, 8022 9490, 8022 9491

Swift Mobil-2	160 kg	135 kg**	352 lbs	297 lbs**	ø 990 mm
Swift Mobil-2 XL	160 kg		352 lbs		ø 990 mm
Swift Mobil 24"-2	160 kg	135 kg**	352 lbs	297 lbs**	ø 1210 mm
Swift Mobil Tilt-2	160 kg	135 kg**	352 lbs	297 lbs**	ø 1040 mm
Swift Mobil Tilt-2 XL	160 kg		352 lbs		ø 1040 mm

** Art No 8022 9477, 8022 9478, 8022 9479, 8022 9486, 8022 9487, 8022 9488, 8022 9491, 8022 9494



Fe	Fe-Cr-Ni	PA	PP
PP/TPV/PA/Fe	PP/TPR	PUR	PES

D

1




2



E

1

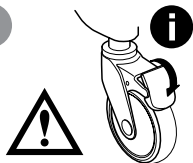


2



3



4

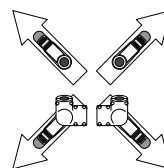

5




6




7








F

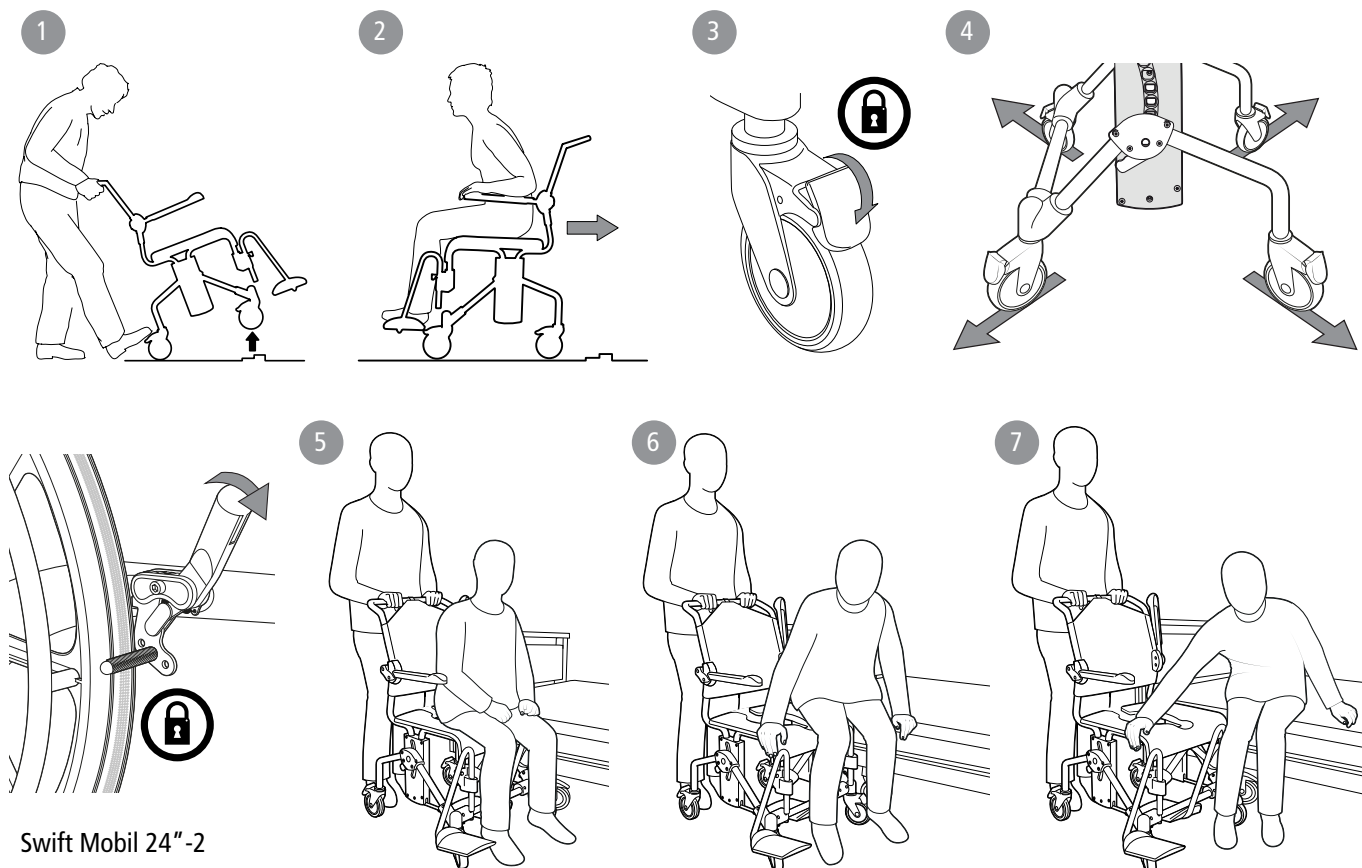

G

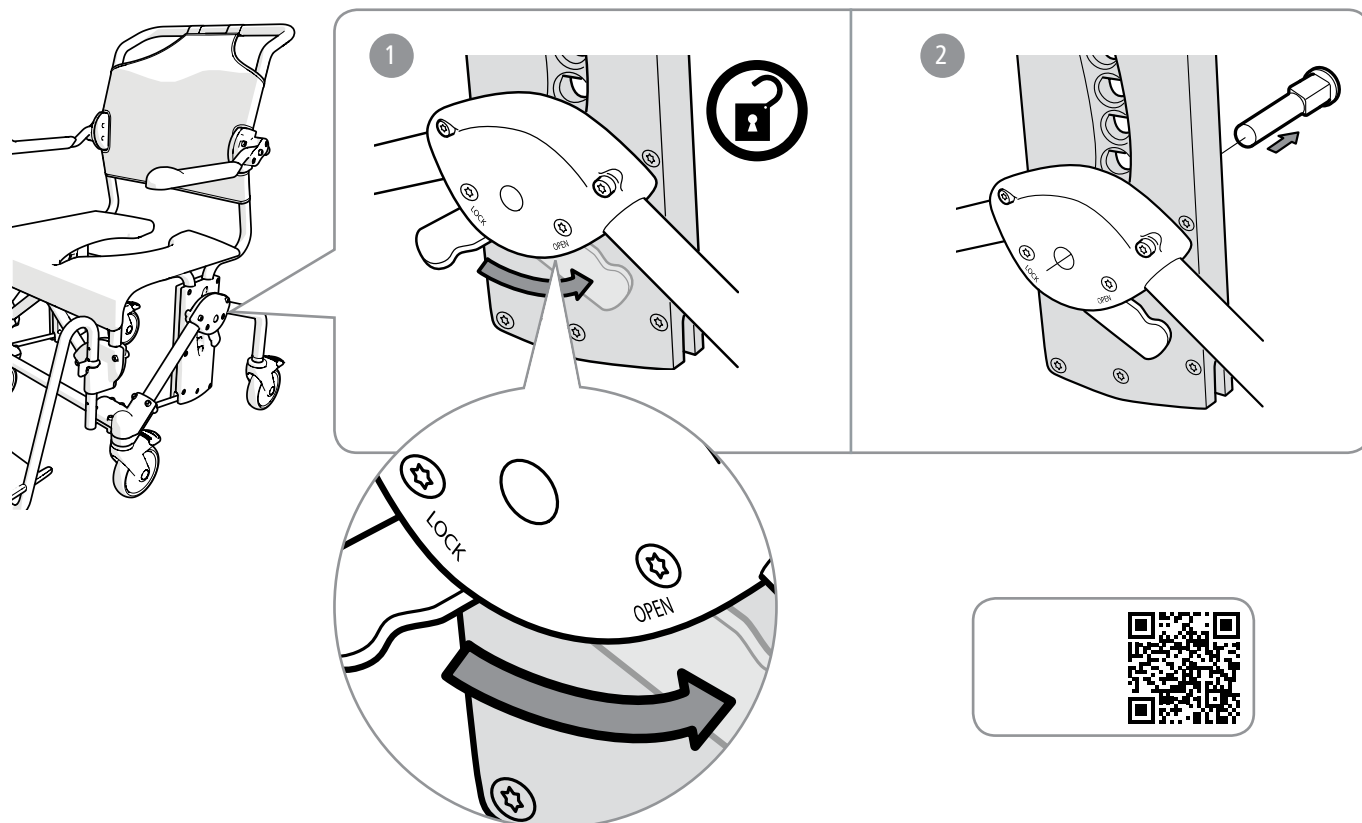


G

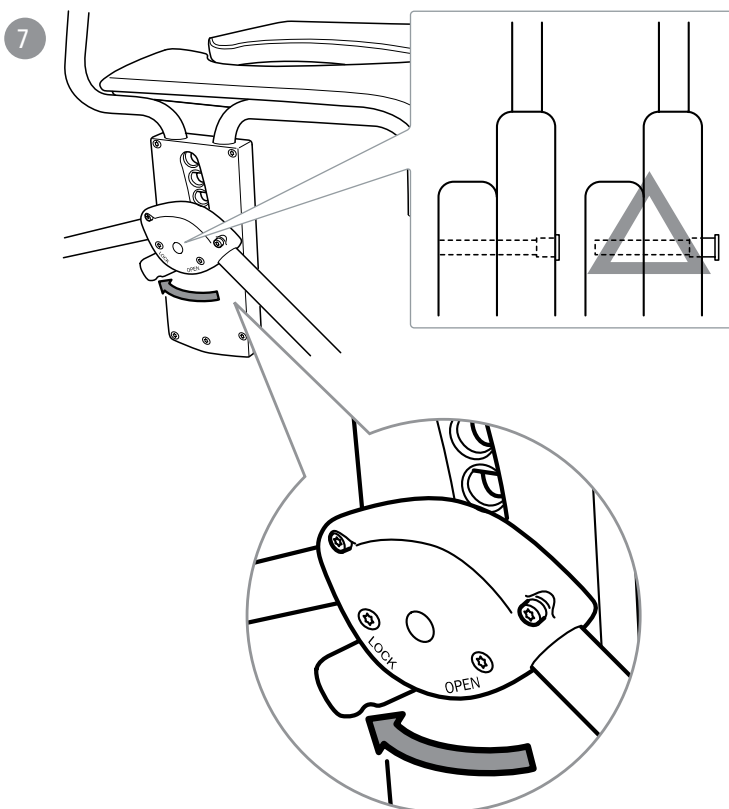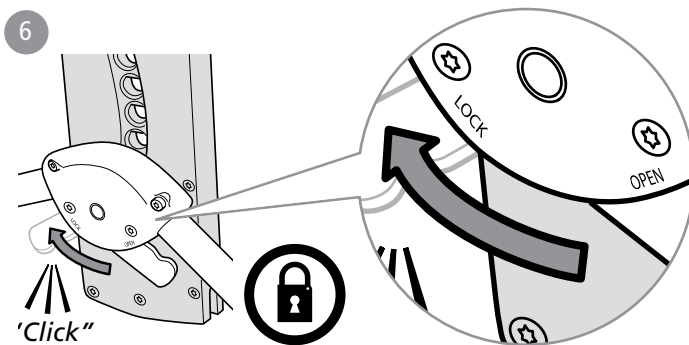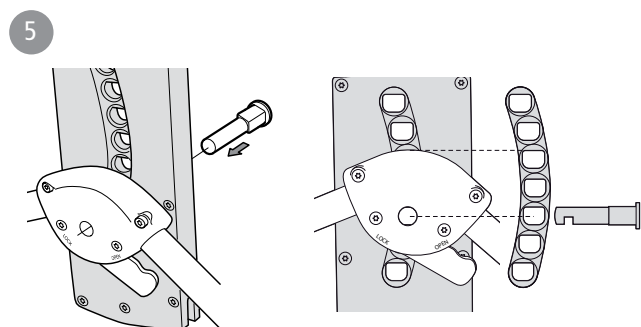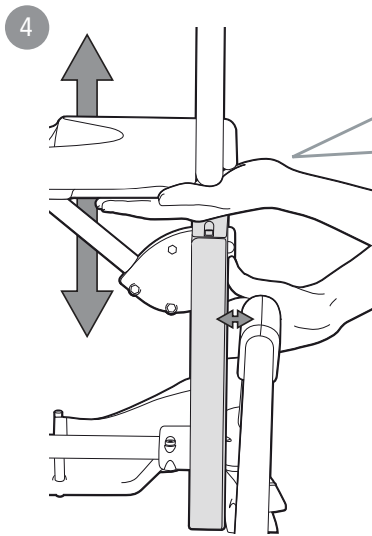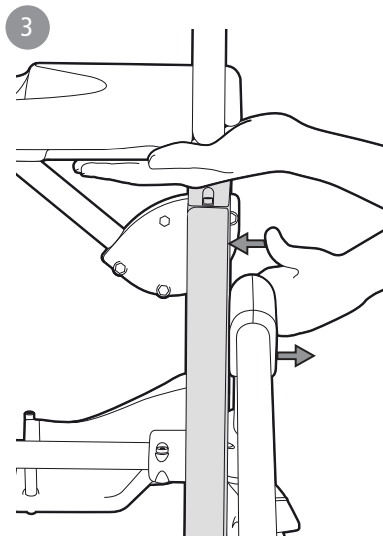




8



T30



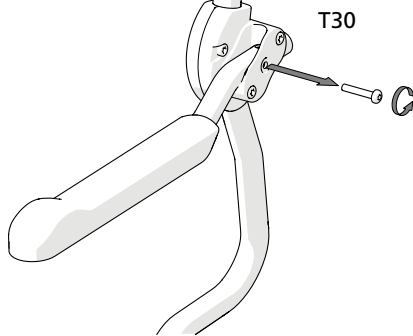


T20

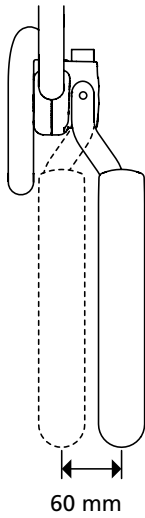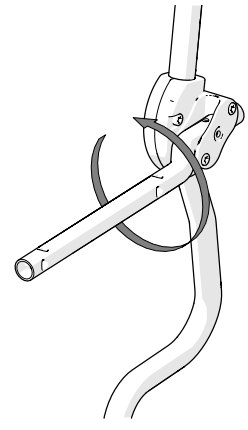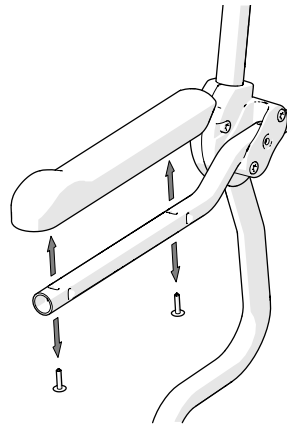


60 mm


60 mm

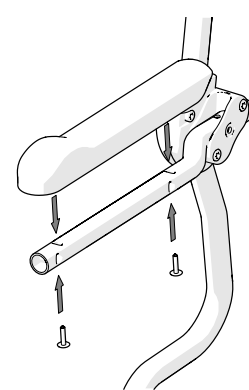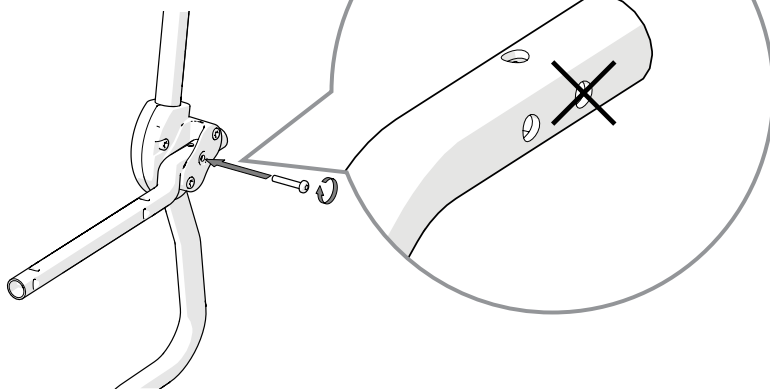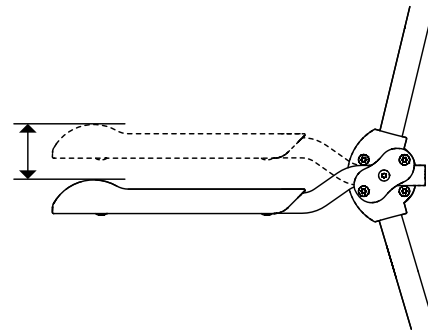

9

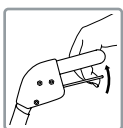


-5° - +30°


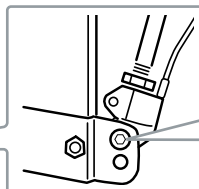


5 mm

10

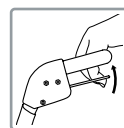


0° - +35°

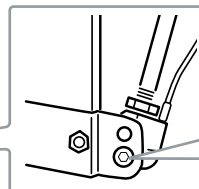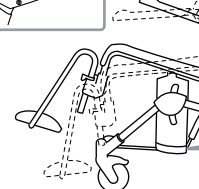

5 mm




sv no da en de fi fr nl is it es pt

11




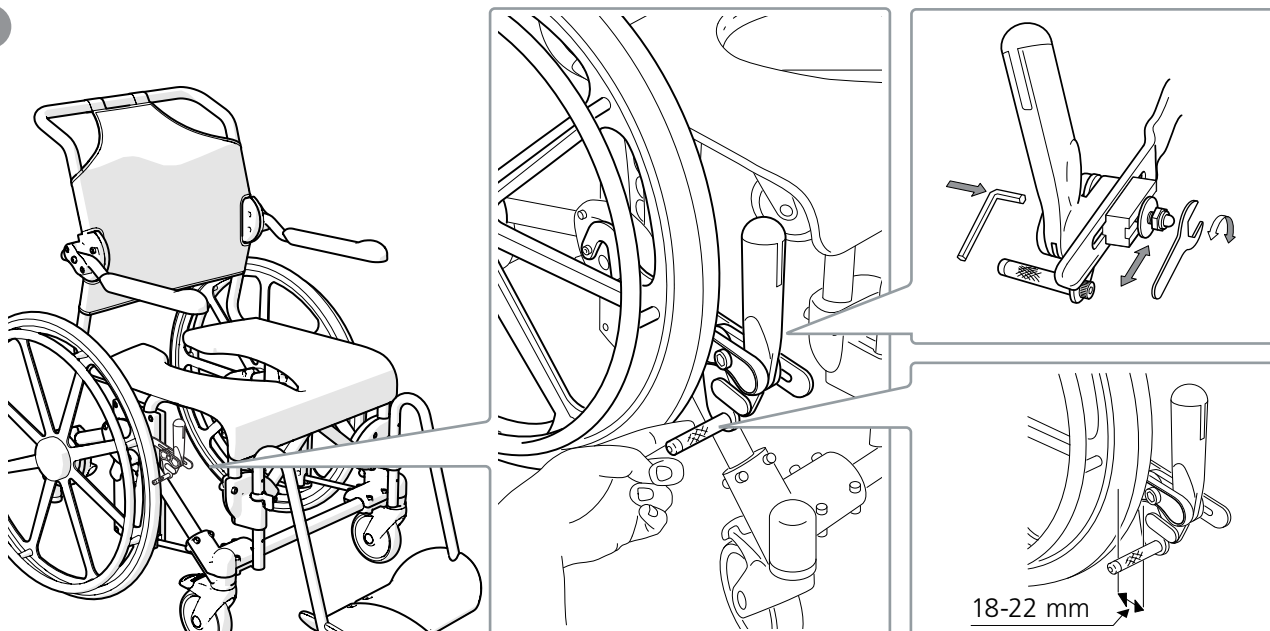


H

1

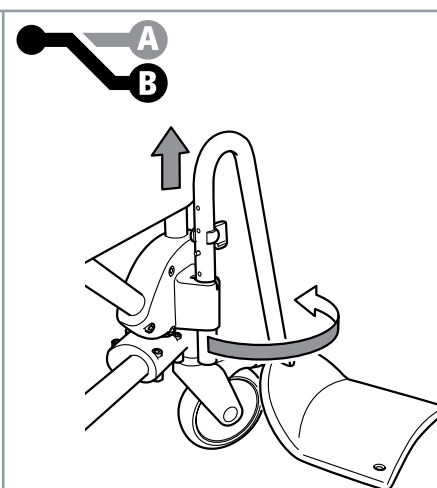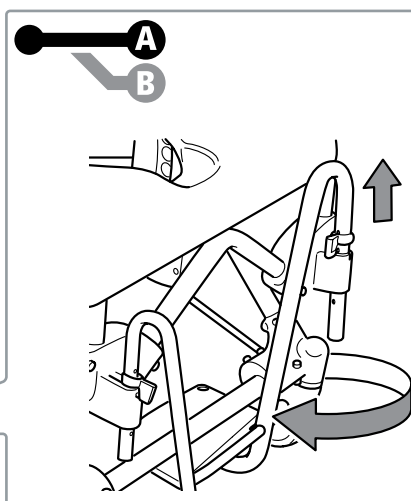
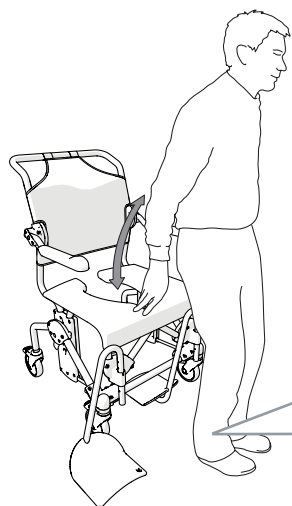


2

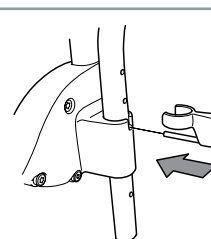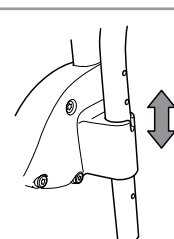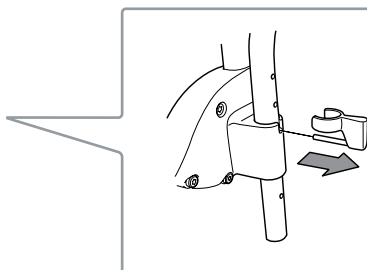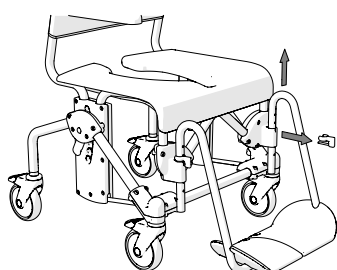

I

1

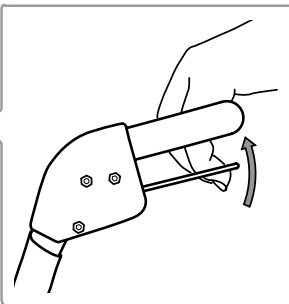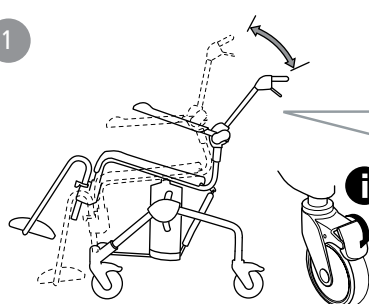

sv no da en de fi fr nl is it es pt

J

1 	2 	3 	4 	5
6 	7 	8 	9 	10
11 	12 	13 	14 	15
16 	17 	18 	19 	20
21 	22 	23 	24 	25
26 	27 	28 	29 	30
31 	32 	33 	34 	35
36 	37 	38 	39 	40
41 				

English

General

Thank you for choosing an Etac product. In order to avoid damage during assembly, handling and use, it is important to read this manual and save it for future reference. You can also find it at www.etac.com. You can select your language via the "International" and "Local websites" link. Here you will also find other product documentation, such as prescriber information, pre purchase guide, and reconditioning instructions.

In the manual, the user is the person sitting in the chair. The carer is the person helping the user.

Intended use:

The Swift Mobile 2 family is a range of mobile shower chairs and toilet chairs (hereafter called the product) intended for indoor use when performing hygiene tasks for people with restricted mobility. The product can be used in the shower, at a sink, or over the toilet, as well as for transfers to and from the hygiene room.

The product is intended for use in home environments and institutions.

The product is suitable for use in wet areas, but not pools or similar corrosive environments.

The product is intended to compensate for various types of injuries or disabilities that limit the mobility of the user.

The product is intended for adult users, generally persons who are at least 146 cm tall and who weigh at least 40 kg.

The product is not intended for any other use or environment beyond those stated above.

The product has been tested and complies with the requirements set out in EN ISO 10993-1 and ISO 17966.

The product conforms to the requirements of the Medical Devices Regulation (EU) 2017/745.

Contra indications:

There are no known contraindications.



This symbol appears in the manual along with text. It indicates instances where the safety of the user or the assistant may be at risk.



The images which are referred to on each page are found at the start of the manual (pages 3 to 11). See Figures A to J for the corresponding text.



This product should be recycled as per national regulations.

Item list: ● = Applies to, ○ = Accessories

See the item list on the right which displays the information applicable to each product.

Product description

See Figure A

A1. Bolt, **A2.** Leg support, **A3.** Seat, **A4.** Arm support, **A5.** Back support upholstery, **A6.** Item no label (serial no, production date)

A7. Head support

*The product's date of manufacture can be read from the barcode on the product. The number 11 is shown below the barcode in brackets. The number combination after these brackets is the date of manufacture.

Assembly

See Figure B

Technical data

See Figure C

Warranty / maintenance

See Figure D

5-year guarantee against material and manufacturing defects. For terms and conditions, see www.etac.com.

Service life 7 years. For complete information regarding the service life of the product, see www.etac.com.

D1. Clean the product with normal non-abrasive cleaning agents (pH value of between 5-9). Rinse and dry.
Disinfect the product with an alcohol-based disinfectant, 70%.
The product is otherwise maintenance-free.

D2. The product and its accessories can be safely cleaned at 85°C for 3 minutes (unless otherwise stated). This applies for reconditioning.

The product can be reconditioned. Refer to the reconditioning instructions at www.etac.com.

Constituent materials are resistant to common disinfectants.

The following surface treatment methods have been used to protect against corrosion:

Lacquered surfaces = Polyester powder coating

Non-lacquered steel surfaces = Fe/Zn-Ni

Reuse

The product is suitable for reuse. The number of times it can be reused depends on how often and in which way the product is used. Before reuse, thoroughly clean and disinfect the product and check its safety features. If necessary, take remedial action.

Storage

The product should be stored indoors in a dry place at a temperature above 5°C. If the product has been stored for a long time (more than four months), its function must be checked by an expert before use.

Swift Mobil-2	Swift Mobil-2 XL	Swift Mobil 24"-2	Swift Mobil Tilt-2	Swift Mobil Tilt-2 XL
●	●	●	●	●
○	○	○	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

English

 Safety

See Figure E



- Defective chairs must not be used.

E1. Make sure the castors are locked when users sit down on or get up from the chair.

- An anti-tip attachment must be used if the user is an amputee.
- E2.** Never stand on the foot supports as there is a risk of tipping!
- E3.** The sitting position has an impact on stability.
- E4.** Chair stability is improved if the castors point outward.
- E5.** See the maximum user weight for your commode chair in the table (page 5).

E6. Risk of crushing with arm supports.

E7. Do not use defective products.

In case of an adverse event occurred in relation to use of the device, it should be reported to your local dealer and the national competent authority in a timely manner. The local dealer will forward information to the manufacturer.

Transfers

See Figure F

Over a threshold:

- F1.** Chair only, put one foot on the wheel.
F2. With user, pull the chair backwards.

In stationary position:

- F3.** Always lock as many castors as possible when the chair is to be used in a stationary position.
- F4.** Out-turned castors improve the chair's stability.

Transferring:

Assess the risks and take notes. You as a carer are responsible for the safety of the user. Aids should be used if the transfer is deemed as risky. Visit www.etac.com for manual transfer aids.

- F3-F4.** It is important to ensure that the castors are locked and pointing outward before carrying out transfers to and from Swift Mobil-2.

- F5-F7.** Fold up the arm support on the transfer side of the chair. Carry out the transfer.

Adjustment

See Figure G

Height:

- G1-G7.** The height is easily adjusted by inserting the bolt in the required position. See distances in the technical data section.



Check that both sides have been adjusted to the same height as otherwise stability can be reduced. G7. Do not use the chair if the bolt (orange) is not locked.

Arm supports:

- G8.** The height of the arm supports and/or width between the arm supports can be adjusted. Loosen the screws, twist the support to the desired position and retighten the screws. Then loosen and refit the arm support plate in the correct position. Swift Mobil Tilt-2 XL is delivered with the arm supports mounted in the most inward position (seat width 48 cm).

Tilt angle:

- G9.** Fit the gas piston in position A to tilt the seat at angles from -5° to 30°
G10. Fit the gas piston in position B to tilt the seat at angles from 0° to 35°

User brake:

- G11.** When adjusting the brake, the brake pin should be set 18 to 22 mm from the rear wheel for good grip.

Leg support

See Figure H

- H1.** The assistant can easily raise and swivel the leg supports to the side for the user to sit down in or get up out of the chair. The foot supports are detachable.

- H2.** Various height adjustment options are available by moving the locking pin. The leg supports have 6 different height settings.

Tilt function

See Figure 1

- 11.** The assistant can adjust the sitting angle with ease by holding in the handle and tilting to the required position. Make sure that the wheels are locked if the tilt function is used when the user is sitting in the chair.

English

Accessories

See Figure J

In the section "Accessories", you can see all accessory options available for your product. Variations may occur in different markets. There are restrictions on accessory combinations, for more information, see www.etac.com.

See Figure J	Sw M.-2	Sw M.-2 XL	Sw M. 24"-2	Sw M. Tilt-2	Sw M. Tilt-2 XL	See Figure J	Sw M.-2	Sw M.-2 XL	Sw M. 24"-2	Sw M. Tilt-2	Sw M. Tilt-2 XL
J1. Leg and calf rest, angle-variable	☐	☐	☐	☐	☐	J23. Armrest cushion, pair	☐	☐	☐	☐	☐
J2. Footrest	☐	☐	☐	☐	☐	J24. Trunk support	☐	☐	☐	☐	☐
J3. Angle adj. footrest	☐	☐	☐	☐	☐	J25. Chest and hip positioning belts	☐	☐	☐	☐	☐
J4. Amputee legrest	☐	☐	☐	☐	☐	J26. Chest belt	☐	☐	☐	☐	☐
J5. Commode pan	☐	☐	☐	☐	☐	J27. Positioning belt	☐	☐	☐	☐	☐
J6. Pan-holder attachments	☐	☐	☐	☐	☐	J28. Crossbar 605 mm	☐	☐	☐	☐	☐
J7. Attachments for low pan-holder mounting	☐	☐	☐	☐	☐	J28. Crossbar 665 mm	☐	☐	☐	☐	☐
J8. Commode pan holders	☐	☐	☐	☐	☐	J29. Anti-tip stabilisers including bracket	☐	☐	☐	☐	☐
J9. Bucket holders	☐	☐	☐	☐	☐	J30. Anti-tip stabilisers excluding bracket	☐	☐	☐	☐	☐
J10. Pan	☐	☐	☐	☐	☐	J31. Tiliter	☐	☐	☐	☐	☐
J11. Lid with handle	☐	☐	☐	☐	☐	J32. Rear wheel kit	☐	☐	☒	☐	☐
J12. Splash guard	☐	☐	☐	☐	☐	J33. Headrest and bracket	☐	☐	☐	☒	☒
J13. Soft Comfort seat, 2 cm high, open at back	☐	☐	☐	☐	☐	J34. Heel straps	☐	☐	☐	☒	☒
J14. Soft Comfort seat, 4 cm high, open at back	☐	☐	☐	☐	☐	J35. Hemiplegic armrest	☐	☐	☐	☐	☐
J15. Comfort seat	☐	☐	☐	☐	☐	J36. Armrest lock	☐	☐	☐	☐	☐
J16. Soft Comfort seat	☐	☐	☐	☐	☐	J37. Extended back support	☐	☐	☐	☐	☐
J17. Soft Comfort seat - narrow opening	☐	☐	☐	☐	☐	J38. Short leg support	☐	☐	☐	☐	☐
J18. Soft cushion - standard opening	☐	☐	☐	☐	☐	J39. Widening kit for leg support	☐	☐	☐	☐	☐
J19. Soft cushion - oval opening	☐	☐	☐	☐	☐	J40. Anti tip front	☐	☐	☐	☐	☐
J20. Seat cover	☐	☐	☐	☐	☐	J41. Back Swift Mobil-2, upright	☐	☐	☐	☐	☐
J21. Soft back pad	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐
J22. Comfort padding	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐